

EBS SARS-CoV-2 Ag rychlý test

Rychlá a spolehlivá antigenní detekce SARS-CoV-2 viru¹



Jednoduchý odběr :
Obsahuje nejtenčí top-kvalitní štětičku pro nosní výtěr

Snadné použití :
Tuba s aktivačním roztokem

Výsledek ve třech krocích :
Vzorek, Extrakce, Analýza vzorku

Úspora času :
Výsledek za 10 minut

1. Pro více informací navštivte stránky výrobce, Technický list, sekce „Produkt Performance“
2. Pro více informací navštivte stránky výrobce, Technický list, sekce „Test procedure“
3. Pro více informací navštivte stránky výrobce, Technický list, sekce „Content“



KLINICKÝ KONTEXT :

Dne 31. prosince byla WHO upozorněna na výskyt několika případů pneumonie neznámého původu ve městě Wuhan (Čína). Patogen způsobující tyto pneumonie byl identifikován jako nový koronavirus zvaný SARS-CoV-2, s přidruženým onemocněním označovaným jako COVID-19.

V reakci na rostoucí pandemii COVID-19 a nedostatek laboratorních kapacit molekulárního testování a činidel, mnozí výrobci diagnostických testů vyvinuli a začali prodávat rychlé a snadno použitelné testy antigenu, které usnadní testování mimo laboratorní prostředí. Tyto jednoduché testovací soupravy jsou založeny na detekci proteinů z viru COVID-19 ve vzorcích dýchacích cest a podporují lokální instituce při zvyšování testovací kapacity a přerušení řetězce přenosu viru⁴.

JEDNODUCHÝ POSTUP¹ :



1

Nosohltanová štětička

Extrakce vzorku.
Vložte štětičku se vzorkem
do tuby s aktivčním
roztokem na **1 minutu**.



2



3


Kapněte **3 kapky**
na testovací destičku.

Přečtěte si výsledek za **10 minut**²

C = Kontrola
T = Test

4


Pozitivní

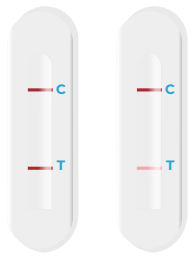

Negativní



Neplatný

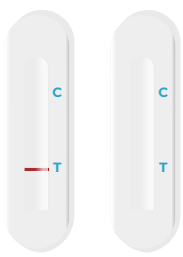

PARAMETRY PRODUKTU

Reference	Označení	Formát
EBS 1020	EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test	20 tests



Limit pro detekci¹
2x10⁶ TCID₅₀/mL

4. <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19>